



bagni ad olio

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT

bağni ad olio





I N D I C E

bagni ad olio

04

Bagni ad olio
con vasca circolare

05

Bagni ad olio
con vasca rettangolare

bagni ad olio

BAGNI AD OLIO CON VASCA CIRCOLARE



BO



BO-D



Ottimo isolamento termico garantito dalla doppia parete. Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni



Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire



BO: Uniformità della temperatura controllata da un termostato con sonda.

BO-D: Il controllo della temperatura avviene tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100.



Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza

Dati tecnici		BO-4	BO-12	BO-D24	BO-D30
Capacità	lt	6	13	6	13
Potenza riscaldante	W	1000	1400	1000	1400
Precisione	°C	5	5	1	1
Scarico		si	si	si	si
Temperatura	°C	+50 a +300	+50 a +300	+5 amb. a +300	+5 amb. a +300
Dimensioni esterne LxPxH	mm	305x260	390x340	305x290	390x340
Dimensioni interne LxPxH	mm	220x150	250x200	220x150	280x200
Peso	kg	5,2	8,2	5,8	9,4
Codice		614.1033.03	614.1033.12	614.1035.04	614.1035.12

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3,1

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

ACCESSORI



Coperchio in acciaio inox 18/8 ad anelli concentrici

BO-4/BO-D24

Codice 610.1010.24

BO-12/BO-D30

Codice 610.1010.32



Portaprovette a tre piani in acciaio inox 18/8 con maniglia centrale

	BO-4/BO-D24	BO-12/BO-D30
	36 fori Ø21	60 fori Ø21
Codice	212.9260.03	212.9260.04

bagni ad olio

BAGNI AD OLIO CON VASCA RETTANGOLARE



La struttura esterna e la vasca sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo



Termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa



Controllo Temperatura ad azione PID con sonda PT100



WB-OD


Dati tecnici		WB-OD5	WB-OD15	WB-OD24
Capacità vasca	lt	5	12	18,5
Temperatura regolabile	°C	+5 amb. a +300	+5 amb. a +300	+5 amb. a +300
Precisione in vasca con H ₂ O	°C	±1.0	±1.0	±1.0
Scarico		si	si	si
Potenza resistenza riscaldante	W	700	1400	2100
Dimensioni interne LxPxH	mm	100x250x150	255x290x150	255x440x150
Dimensioni esterne LxPxH	mm	280x360x240	445x385x240	445x560x240
Peso	kg	5,2	6,2	9
Codice		614.1032.05	614.1032.15	614.1032.24

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 1

CLASSE DI PROTEZIONE 42

ACCESSORI

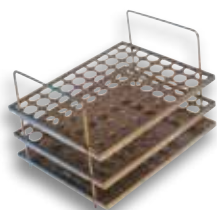

Portaprovette a tre piani in acciaio inox 18/8

	2 per vasca	1 per vasca	2 per vasca
	12 fori Ø21	48 fori Ø21	48 fori Ø21
Codice	212.1250.02	212.1250.05	212.1250.05
	20 fori Ø17	60 fori Ø17	60 fori Ø17
Codice	212.1250.03	212.1250.06	212.1250.06



Coperchio piatto in acciaio inox 18/8 ad anelli concentrici. Max per foro Ø85 mm

Fori n.	2	4	6
Codice	610.1007.35	610.1007.34	10.1007.36



Coperchio in acciaio inox 18/8

Codice	616.1025.05	616.1025.12	616.1025.14
--------	-------------	-------------	-------------

Note

[illegible]

Note

[illegible]



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT