

incubatori refrigerati

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT

incubatori refrigerati

INCUBATORE REFRIGERATO 0°C ÷ 80°C



Display LCD touch screen
Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida.
Camera interna completamente in acciaio inox 18/8
Porta interna in vetro temperato



Controllo digitale della temperatura con microprocessore ad azione PID con sonda PT 100
Temperatura di lavoro 0-80°C



Timer digitale (hh:mm:ss o infinito)



Chiusura porta con chiave



Ventilazione forzata



Impostazioni 4 lingue: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo
Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento)
Partenza programmabile (giorno/ora)
Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione certificato Accredia LAT
N°2 Fori Ø40mm sui fianchi laterali per inserimento termometro o sonde di controllo

Dati tecnici

		ICT-C 100	ICT-C 250
Capacità	lt	100	250
Temperatura	°C	0-80°C	0-80°C
Risoluzione display	°C	0.1	0.1
Timer	hh:mm:ss	99:59:59 o infinito	99:59:59 o infinito
Stabilità di temperatura a	4°C	+/-0.4	+/-0.4
	22°C	+/-0.4	+/-0.4
	37°C	+/-0.4	+/-0.4
	60°C	+/-0.8	+/-0.8
	80°V	+/-0.8	+/-0.8
Ripiani di serie	N°	2	2
Numero di ripiani max	N°	4	6
Gas		R290	R290
Carico max per ripiano	Kg	15	15
Carico max strumento	Kg	60	90
Dimensioni interne LxPxH	mm	521x535x575	521x535x1058
Dimensioni esterne LxPxH	mm	621x685x1125	621x685x1608
Potenza	W	1200	1200
Peso	Kg	82	104
Codice		720.2070.90	720.2070.91

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

ACCESSORI:

720.2091.47 Ripiano grigliato per incubatore refrigerato ICT-C 100 lt

720.2091.48 Ripiano grigliato per incubatore refrigerato ICT-C 250 lt

720.2091.49 Ripiano forato per incubatore refrigerato ICT-C 100 lt

720.2091.50 Ripiano forato per incubatore refrigerato ICT-C 250 lt

Incubatori refrigerati con Rampe di lavoro

INCUBATORE REFRIGERATO 0°C ÷ 80°C



Display LCD touch screen
Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciata a forno
con polvere epossidica antiacida.
Camera interna completamente in acciaio inox 18/8
Porta interna in vetro temperato



Controllo digitale della temperatura con microprocessore ad azione
PID con sonda PT 100
Temperatura di lavoro 0-80°C



Timer digitale (hh:mm:ss o infinito)




Chiusura porta con chiave



Ventilazione forzata



Impostazioni 4 lingue: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo
Partenza e arresto programmabili (giorno/ora)
Programmabili con rampe: 20 programmi da 8 segmenti
Rapporto di taratura eseguito con uno strumento campione
certificato Accredia LAT
N°2 Fori Ø40mm sui fianchi laterali per inserimento termometro
o sonde di controllo

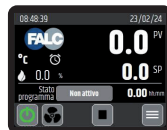

Dati tecnici		ICT-CR 100	ICT-CR 250
Capacità	lt	100	250
Temperatura	°C	0-80°C	0-80°C
Risoluzione display	°C	0.1	0.1
Timer	hh:mm:ss	99:59:59 o infinito	99:59:59 o infinito
Stabilità di temperatura a	4°C	+/-0.4	+/-0.4
	22°C	+/-0.4	+/-0.4
	37°C	+/-0.4	+/-0.4
	60°C	+/-0.8	+/-0.8
	80°C	+/-0.8	+/-0.8
Ripiani di serie	N°	2	2
Numero di ripiani max	N°	4	6
Gas		R290	R290
Carico max per ripiano	Kg	15	15
Carico max strumento	Kg	60	90
Dimensioni interne LxPxH	mm	521x535x575	521x535x1058
Dimensioni esterne LxPxH	mm	621x685x1125	621x685x1608
Potenza	W	1200	1200
Peso	Kg	82	104
Codice		720.2070.92	720.2070.93

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

ACCESSORI:

720.1091.10 Modulo wifi per monitoraggio da remoto tramite APP
720.2091.47 Ripiano grigliato per incubatore refrigerato ICT-C AR 100 lt
720.2091.48 Ripiano grigliato per incubatore refrigerato ICT-C AR 250 lt
720.2091.49 Ripiano forato per incubatore refrigerato ICT-C AR 100 lt
720.2091.50 Ripiano forato per incubatore refrigerato ICT-C AR 250 lt



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT