



bagni a circolazione

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT



bagni a circolazione



I N D I C E

04

bagni a circolazione

Bagni a circolazione con riscaldamento

05

Bagni refrigerati - criostato

bagni a circolazione

BAGNI A CIRCOLAZIONE CON RISCALDAMENTO



Scansiona
per maggiori
info



SB



Display LCD touch screen
La vasca è in acciaio inox 18/8 stampata in un unico pezzo con relativo coperchio



Il controllo della temperatura avviene tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100. La pompa d'agitazione garantisce un'ottima uniformità della temperatura all'interno della vasca
Timer digitale hh:mm:ss o infinito



Lo strumento è predisposto per il collegamento al set pompa esterna
Impostazione 4 lingue (Italiano-Inglese-Franese-Spagnolo)
Velocità pompa regolabile digitalmente
Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/velocità pompa)
Partenza ritardata programmabile (giorno ora)

Dati tecnici		SB 5T	SB 15T	SB 24T
Capacità vasche	lt	5	12	18,5
Rubinetto di scarico		no	no	si
Timer digitale	hh:mm:ss	99:59:59 or ∞	99:59:59 or ∞	99:59:59 or ∞
Temperatura regolabile	°C	+5 amb. a 150	+5 amb. a 150	+5 amb. a 150
Precisione con H ₂ O	°C	±0,5	±0,5	±0,5
Risoluzione display	°C	0.1	0.1	0.1
Portata pompa mbar 190	lt/min	9	9	9
Prevalenza mt. 1.8	lt/min	7,8	7,8	7,8
Potenza resistenza riscaldante	W	1300	1300	1300
Dimensioni interne sul fondo LxPxH	mm	250x100x150	290x255x150	240x440x150
Dimensioni utili in vasca LxPxH	mm	100x125x150	255x165x150	255x330x150
Dimensioni esterne LxPxH	mm	330x180x450	350x360x450	350x530x450
Peso	kg	7	8	11
Codice		612.1029.06	612.1029.16	612.1029.25

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30


ACCESSORI



SET POMPA ESTERNA
Permette l'alimentazione esterna tramite un circuito chiuso.
Gli attacchi sono da Ø12mm.
Codice 612.1029.02



Dispositivo livello galleggiante inox per mancanza acqua
Codice 612.1029.04

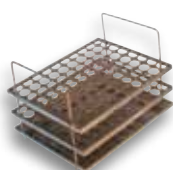

Portaprovette a tre piani in acciaio inox 18/8

	1 per vasca	1 per vasca	2 per vasca
	12 fori Ø21	48 fori Ø21	48 fori Ø21
Codice	212.1250.02	212.1250.05	212.1250.05
	20 fori Ø17	60 fori Ø17	60 fori Ø17
Codice	212.1250.03	212.1250.06	212.1250.06

bagni a circolazione

BAGNI REFRIGERATI - CRIOSTATO



Display LCD touch screen
Le vasche sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo



Il controllo della temperatura avviene tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100.



Spegnimento automatico del compressore oltre i 37,0°C.



Timer digitale hh:mm:ss o infinito



Funzione Eco Friendly, il compressore di raffreddamento entra in funzione solo se necessario



Facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo strumento
Impostazione 4 lingue (Italiano- Inglese- Francese – Spagnolo)
Velocità pompa regolabile digitalmente
Funzione salvataggio programmi (temperatura/mantenimento/velocità pompa)
Partenza ritardata programmabile (giorno ora)



SBF

Dati tecnici		SBF 7T			SBF 15T		
Capacità	lt	7			15		
Rubinetto vasca		no			no		
Timer digitale	hh:mm:ss	∞ o 99:59:59			∞ o 99:59:59		
Temperatura di lavoro	°C	-30 a +150			-30 a +150		
Precisione in vasca	°C	±0,2			±0,2		
Potenza riscaldante	W	1300			1300		
Potenza refrigeratore	°C	-25	0	25	-25	0	25
	W	210	170	260	520	600	850
Tipo pompa		premente			premente		
Portata	lt/min	7,8			4		
Prevalenza	mt	2,5			2,5		
Dimensioni sul fondo LxPxH	mm	100x250x200			250x290x200		
Dimensioni utili in vasca LxPxH	mm	100x150x200			250x190x200		
Dimensioni esterne LxPxH	mm	300x440x730			440x475x730		
Peso	kg	31			41		
Codice		612.1050.08			612.1050.16		

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 2

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30

ACCESSORI



Dispositivo livello galleggiante inox per mancanza acqua

Codice 612.1029.04

Rotelle

Codice 612.1050.31

Tubo per circolazione esterna 1,5 m

Codice 612.1050.33

1 lt di liquido per criostato -30÷80°C 1 LT

Codice 612.1050.35

Note

[illegible]

Note

[illegible]



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT