




## **Agitatore in vetroceramica con riscaldamento e predisposizione sonda - F91T**

---

L'agitatore F91T ha una struttura esterna in alluminio verniciata con polvere anti-acida epossidica per garantire robustezza per l'utilizzatore, qualora dovesse lavorare con sostanze aggressive.

L'F91T può lavorare anche senza l'agitazione fungendo da piastra riscaldante in quanto avendo la ventilazione interna, si evita il surriscaldamento.

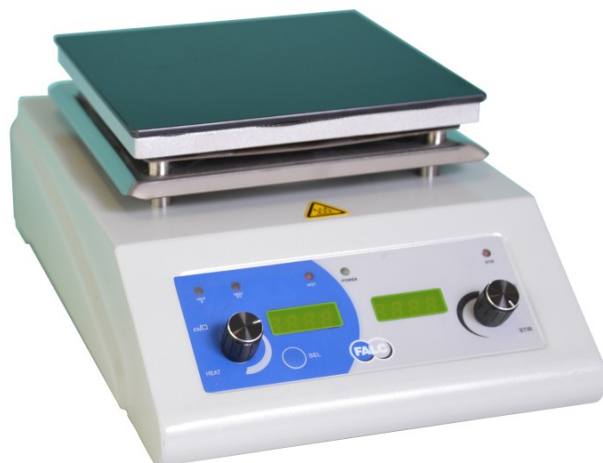



---

## Descrizione

La superficie in vetroceramica garantisce un rapido riscaldamento.

Controllo digitale della velocità e della temperatura

Motore in corrente continua

Ventilazione interna per evitare surriscaldamento

Possibilità di collegare l'agitatore ad un kit per monitorare la temperatura del liquido



| Caratteristiche tecniche      |                |
|-------------------------------|----------------|
| Alimentazione                 | V/HZ 230/50-60 |
| Codice                        | 601.0122.93    |
| Potenza riscaldante           | W 550          |
| Dimensioni esterne (LxPxA)    | mm 220x240x145 |
| Peso                          | KG 3.6         |
| Classe di protezione          | IP 40          |
| Superficie riscaldante        | mm 120x120     |
| Capacità max agitazione       | lt 15          |
| Velocità variabile            | Rpm 150-1500   |
| Foro per aste                 | SI             |
| Connettore termometro         | SI             |
| Temperatura piastra           | °C +50 to +550 |
| Potenza motore                | W 20           |
| Piastra in vetroceramica      | mm 160X160     |
| Precisione con sonda inserita | °C $\pm 1$     |